

Admisión de pacientes  
desde el Centro de Información


# Cómo admitir un paciente



Ventana de paciente > Gestión de pacientes > **Buscar paciente**



- Botón **Buscar paciente...** permite buscar *datos de paciente* en la PIC iX y cualquier HIS. Permite encontrar datos de pacientes actuales o previamente ingresados.

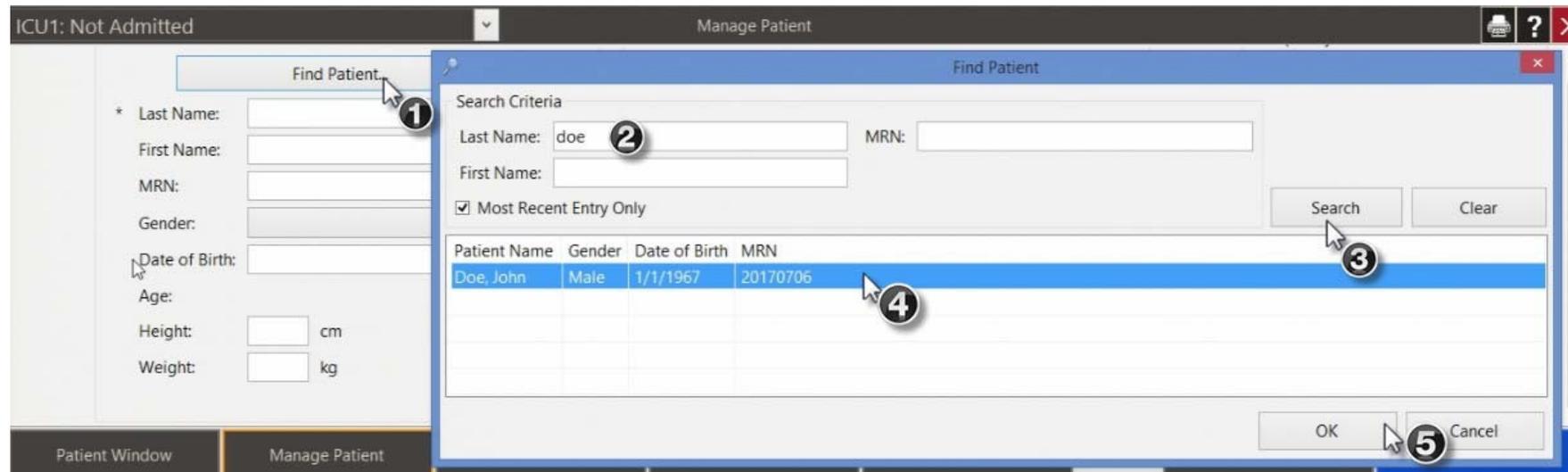

 Para editar la información de un paciente tras realizar la admisión, abrir la ventana **Gestión de Paciente**. Si la información es proporcionada por el HIS, no se podrá editar en la PIC iX.

# Ventana del paciente

Manage Patient

Notificación de admisión con interfaz ADT\*

- La admisión manual puede estar deshabilitada → Campo en gris
- Sólo afecta a campos demográficos.
- Usar: **Buscar Paciente...** para realizar la admisión.
- Se deshabilitará también la admisión manual en el monitor a pie de cama.



\*Algunos hospitales con interfaz ADT puede deshabilitar la admisión manual.

# Admisión de un paciente

Notificación de admisión con interfaz ADT.

- Ver conflicto en el campo: Nombre (fuente en color rojo con ???).
- Navegar a **Gestión de Paciente** para ver en HIS la ventana con la *smart question*.
- Seleccionar Admitir o Cancelar.



The screenshot displays the ADT interface with a patient admission notification overlay. The notification shows the room number '1bed1', a red warning '???Not Admi...', and a 'Check Settings' button. It also displays vital signs: 'HR 60' and 'SpO2 95'. Below the notification, the 'Patient Demographics' form is visible, including fields for Last Name, First Name, MRN, Visit Number, Gender, Date of Birth, Age, Height, and Weight. A 'HIS Action' dialog box is open, asking 'Confirm patient New2, Patient2 to 1bed1?' with 'Confirm' and 'Delay' buttons. The bottom navigation bar includes 'Patient Window', 'Manage Patient', 'Measurements', 'Review', 'Main Setup', and 'Main Screen'.

# Admisión de un paciente

Admisión automática con interfaz ADT

- Abrir readmisiones: Ventana HCE botón azul

Manage Patient



The screenshot displays the 'Manage Patient' window with a patient admission dialog box open. The dialog box, titled 'HIS Action', contains the text 'Readmit Mouse, Minnie?' and two buttons: a blue 'Readmit' button with a bed icon and a 'Delay' button. The background interface includes the following sections:

- Patient Demographics:** Fields for Last Name, First Name, MRN, Visit Number, Gender, Date of Birth, Age, Height (cm), and Weight (kg). A 'Find Patient...' button is at the top.
- Patient Care Information:** Fields for Equipment (7BMX550), Profile (Bedside), and Category (Adult). A 'Group' dropdown and 'Screen Notes' field are also present.
- Temporary:** Buttons for 'Transport/Standby...' and 'Resume'.
- Permanent:** Buttons for 'Transfer...', 'Discharge...', and 'Clear Sector...'.
- Buttons:** 'Apply' and 'Cancel' buttons are located at the bottom right of the main window.
- Navigation Bar:** At the bottom, a bar contains buttons for 'Patient Window', 'Manage Patient' (highlighted with an orange border), 'Measurements', 'Review', 'Main Setup', and 'Main Screen' (highlighted in blue).